

## ANHÖRIG SÄNDARE / BABYVAKT

Bruksanvisning för Användare / Installatör

A-2656-2691-2690

Gratulerar till köpet av din "Signalux Anhörig sändare /babyvakt". Du har valt Signalux från Humanteknik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

Bild1: Framsidan


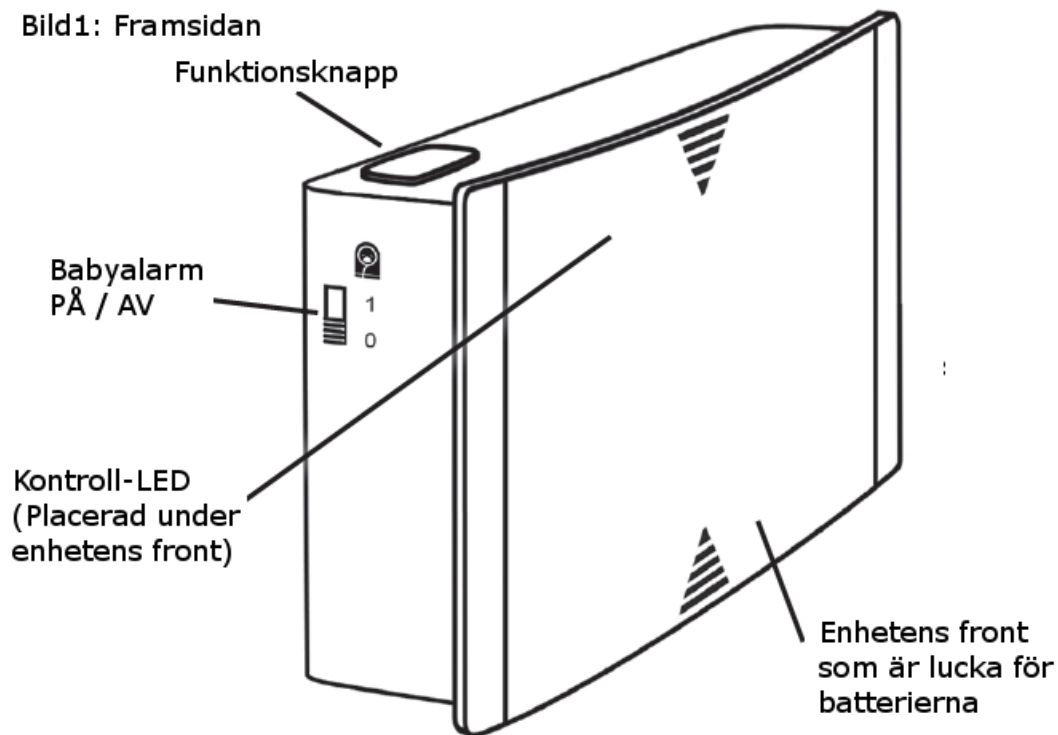


Bild 2: Undersidan

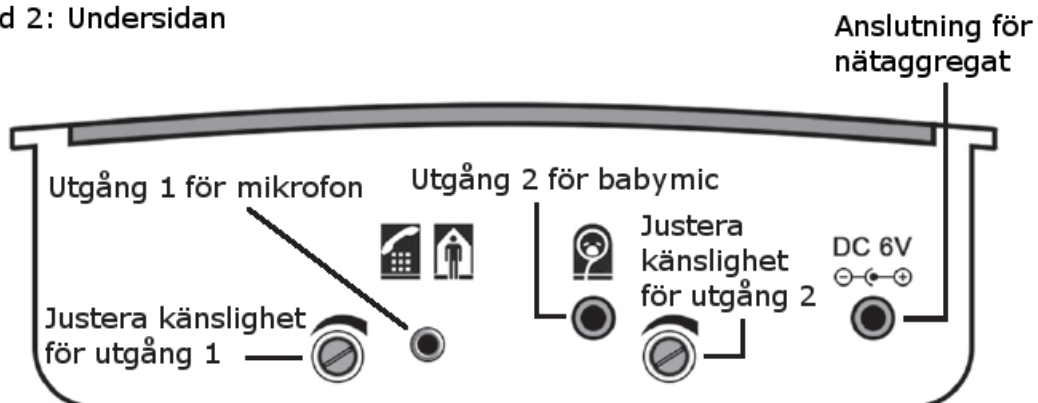

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)

### DELAR SOM INGÅR I ENHETEN

I din förpackning skall du finna följande tillbehör som medföljer:


- Sändarenheten
- 3x batteri typ AAA\*
- Babymikrofon med kabel\*
- Montagedetaljer för fastsättning\*
- Nätadapter\*
- Användarmanual
- Garantikort

Om någon del saknas, vänligen kontakta din återförsäljare omgående, eller kontakta tillverkaren omgående.

*\*finns även som reservdel*


### HANDHAVANDEBESKRIVNING

Första gången du använder enheten behöver du sätta i de medföljande batterierna. Börja med att ta bort den främre fronten på enheten för att få tillgång till batteriernas placering. Tryck den främre fronten uppåt. (Se Bild)

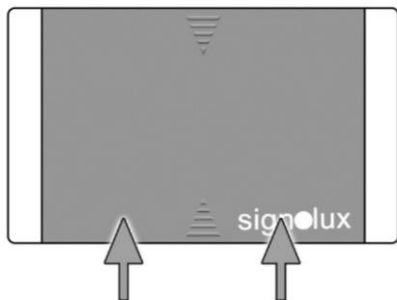


När fronten har flyttats en bit upp kan den tas bort och batterierna kan placeras i dess fack.

OBS! Var noga med att placera batterierna med rätt. (Se Bild)

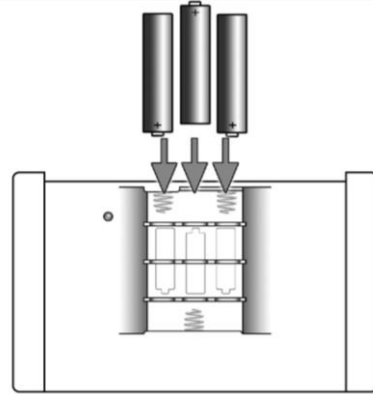

När du har satt i batterierna placerar du fronten på enheten, lämna cirka en centimeter nertill på enheten. (se Bild)

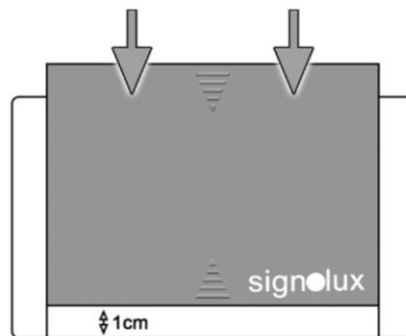

Tryck ner fronten tills du hör ett klick. Nu är fronten i sin ordinarie position.

### ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS

Denna produkt är en kombination av produkterna Akustisk sändare, A-2656-0, Babymikrofon, A-2691-0, samt nätaggreat, A-2690-0.

Första gången du använder enheten måste den paras ihop med samtliga mottagare som den skall kommunicera med. Har du fått ditt varseblivningssystem förskrivet av Landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så har installationen med stor sannolikhet ingått.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humantechnik.se](http://www.humantechnik.se)



Om inte så har du fått tillgång till den manual som är avsedd för datorer och installatörer. I denna beskrivs mer utförligt hur man parar nya enheter till systemet.

Enheten kan fungera på bara batteridrift men vi rekommenderar att du som använder Babyalarm alltid har den kopplad till ett nättaggregat.

### **SYFTE OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Denna sändare registrerar akustiska händelser och skickar signal till mottagare i samma serie. Mottagaren ger dig varseblivning via akustisk, visuell eller taktisk signal (beroende på vilken typ av mottagare du har). Denna enhet kan användas som Babyalarm men också som sändare för telefon, dörrklocka, alarm eller annat ljud, men för det fallet finns separat manual.

Ljudet från barnet fångas in akustiskt via en speciell typ av mikrofon. Känsligheten på mikrofonen kan justeras via en justeringsskruv på enhetens undersida, se bild 2. När installationen av Babyalarmet gjordes så justerades känsligheten in, denna kan dock behöva justeras lite då och då under tiden som den används. Detta kan göras via justeringsskruven för utgång 2, se bild.

Börja alltid med att ha det högsta värdet och skruva känsligheten neråt till dess att enheten inte detekterar fellarm så som exempelvis snarkningar eller annat.

**OBS! Se till att mikrofonen, sladdar och annat som tillhör sändaren inte kan nås av barnet.**

### **ANVISNINGAR FÖR NORMALT UNDERHÅLL**

Denna enhet behöver inget direkt underhåll. Om enheten blir dammig eller smutsig så torkas den av med en torr mjuk dammtrasa.

Placera inte enheten i våtrum eller på platser där den utsätts för hög värme eller konstant solljus. Enheten skall placeras på fast yta och skall inte vara utsatt för konstanta rörelser eller skakningar.

TEKNISKA DATA	
Strömförsörjning:	3x AAA batterier 1,5v
	Eller
	230V, 50Hz, 6V DC 1000mA
Höjd	75mm
Bredd	122mm
Djup	38mm
Vikt	128g (exkl. batterier)
Sändningsfrekvens	868,35MHz
Stand-by	1-2 år



Denna produkt är i överensstämmelse med EU direktiv:

- 2011/65/EC RoHS-direktivet
- 2002/96/EC WEEE -direktivet
- 1999/5/EC R&TTE -direktivet

Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

[www.humanteknik.se](http://www.humanteknik.se)